

Saturs

01.	Ievads	2
02.	Paredzētā izmantošana	2
03.	Mikrostrāva	3
04.	Saturs	4
05.	Drošības norādījumi	5
06.	Pirms lietošanas	8
07.	Sejas apstrāde	9
08.	Uniwand lietošana	15
09.	Atkritumu utilizācija	17
10.	Problēmu novēršana	18
11.	Garantija	19
12.	Tehniskā specifikācija	20
13.	Simbolu tabula	21

01. Ievads

Uniwand ļauj mājas apstākļos izbaudīt profesionālu skaistumkopšanas procedūru.

Uniwand ir neinvazīvs sejas tonizēšanas instruments, ko lieto kopā ar mikrostrāvas sejas tonizēšanas ierīcēm, piemēram, Uniglo, lai samazinātu redzamas novecošanās pazīmes. Ierīce darbojas, piegādājot zema līmeņa elektriskos impulsus ar dubulto sfēru galviņu uz sejas muskuļiem. Precīza un elastīga kontrole ļauj mērķēt uz konkrētajām vajadzīgajām zonām. Mikrostrāvas terapijai jābūt pilnīgi nesāpīgai – strāva ir tik maza, ka to reti jūt.

02. Paredzētā izmantošana

Uniwand ir aksesuārs, kas paredzēts lietošanai kopā ar TensCare skaistumkopšanas līdzekļiem mājas apstākļos, lai mazinātu novecošanās pazīmes. Tas ir piemērots lietošanai ikvienam, kurš spēj kontrolēt ieīci un saprot tās darbību.

Lietotāji: ikviens, kam ieīce ir saprotama un kurš spēj to kontrolēt.

Mērķis: tikai kosmētiska sejas procedūra.

Brīdinājums: nav piemērots bērniem bez pieaugušo uzraudzības.

Svarīgi: lietojiet tikai ar mikrostrāvas programmām (Uniglo FACE 2).
Nenomainiet parametrus!

Uzmanību: ja lietojat kopā ar Uniglo Face and Body Toning, izmantojiet tikai programm FACE 2.

03. Mikrostrāva

Mikrostrāvas stimulācija piegādā mazu strāvu tieši šūnām.

Skaistumkopšanas profesionāļi to izmanto kā neinvazīvu līdzekli ādas nostiprināšanai un grumbiņu samazināšanai.

Preventīvi un korigējoši efekti: ādas nostiprināšana, līniju un grumbiņu mīkstināšana, muskuļu un audu atjaunošanās veicināšana.

Galvenie ieguvumi:

- *Veicina kolagēna ražošanu un audu apjoma atjaunošanu;

- *Nostiprina un mīkstina līnijas un grumbiņas;

- *Paceļ "nogurušos" muskuļus;

- *Samazina acu zonu pietūkumu un tumšos lokus;

- *Piešķir ādai jauneklīgu izskatu;


- *Sasprindzina un sašaurina poras;

- *Uzlabo ādas toni un struktūru.

04. Saturs

1 x Uniwand

1 lietošanas instrukcija

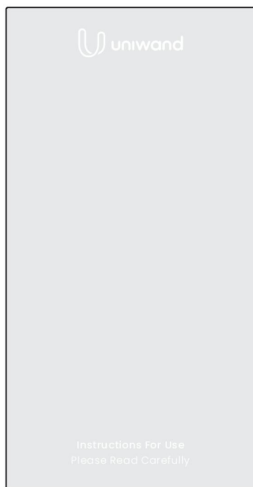

05. Drošības norādījumi



Kontrindikācijas

Kontrindikācijas

*Nelietot, ja Jums ir sirds stimulators vai ritma traucējumi;

*Nelietot, ja Jums ir jebkādi citi elektroniski implantī;

*Nelietot pirmajos 3 mēnešos pēc grūtniecības sākuma.



Brīdinājumi

*Lietojiet tikai ar mikrostrāvas programmām (skat. tehniskos datus);

*Nelietot, vadot transportlīdzekli vai darbojot smagas iekārtas;

*Nelietot vēža skartajās vai neizskaidrotas izcelsmes sāpju zonās;

*Nelietot vienlaikus ar ķirurģisku augsts frekvences aprīkojumu;

*Nelietot galvas vai kakla metāla implantu tuvumā;

*Nelietot injekciju zonā (Botox);

*Nelietot 6–8 nedēļas pēc kolagēna injekcijām;

*Nelietot gadā pēc Retin A / Ro-Accutane terapijas;

*Pirms vada pievienošanas pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta.



Brīdinājumi

- *Viena lietotāja ierīce – nedaliet ar citiem, lai izvairītos no infekcijas;
- *Uzmanīgi, ja Jums ir asiņošanas traucējumi vai epilepsija;
- *Nelietot bērniem, kuri nesaprot instrukcijas vai personām ar demenci;
- *Glabāt bērniem nepieejamā vietā (strangulācijas risks);
- *Nelietot bojātā ādas laukā;
- *Neiegremdēt ūdenīvai pakļaut augstai temperatūrai;
- *Glabāt prom no saules gaismas, putekļiem;
- *Neatveriet ierīci paši – garantija anulējas.

Blakusparādības

Ja jūtat kairinājumu, dedzināšanu vai citas pastiprinātas sāpes,
pārtrauciet lietošanu un konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu.



06. Pirms lietošanas

Uniwand ir izstrādāts lietošanai ar Uniglo FACE 2 programmu.


Svarīgi: ievērojiet visas kontrindikācijas, piesardzības pasākumus un brīdinājumus, kas iekļauti instrukcijā, ieīcei ar kuru kopālietojat Uniwand.

Programmas informācija

Uniglo FACE 2 programma ir izstrādāta, lai nodrošinātu trīs fāzes.

1. fāze – cirkulācija: šī procedūras daļa stimulē epidermas un dermas asinsriti. Tai ir arī aktivējoša iedarbība uz limfas cirkulāciju.
2. fāze – virspusējā liftinga procedūra: šajā programmas daļā tiek sniegts liftinga efekts virspusējiem sejas muskuļiem.
3. fāze – dziļa sejas tonizēšana: šajā fāzē tiek pacelti dziļie sejas muskuļi.

Programmas fāzes Uniglo displejā ir norādītas ar centrālo joslu (attēls zemāk).

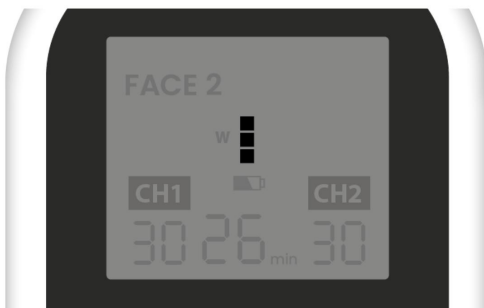

Katrai fāzei intensitātes līmeņi ir iepriekš iestatīti. Tos var samazināt, nospiežot pogu.

Pirmā lietošanas reize

Sagatavošanās

Pirms lietošanas pārliedzinieties, ka jūsu āda ir tīra un sausa. Noņemiet sejas apmatojumu, jo tas var samazināt vadītspēju starp ierīci un ādu, un negatīvi ietekmēt veiktspēju. Izmantojiet Uniwand spoguļa priekšā, lai nodrošinātu precīzas kustības.

07. Sejas apstrāde


Turpmākajās lapās ir detalizēti aprakstītas mikrostrāvas sejas masāžas tehnikas. Katrai sejas zonai ir vairāki dažādi pieskārieni un sākuma pozīcijas.

Katrai sejas masāžas kustībai ar Uniwand vajadzētu ilgt 5 sekundes.

Lietotājam jākoncentrējas uz vienu sejas zonu vienlaikus.




Žoklis un vaigi

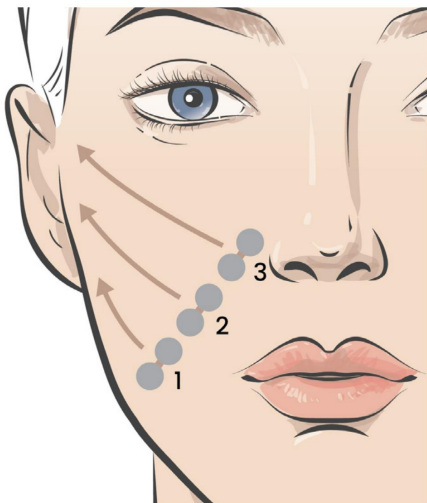


- 1. pozīcija (žoklis) — novietojiet Uniwand uz žokļa līnijas. Lēnām virziet apakšējās auss virzienā.
- 2. pozīcija (vaigiem apakšdaļā) — novietojiet Uniwand zem vaigu kaula. Lēnām virziet Uniwand uz auss vidusdaļu.
- 3. pozīcija (vaigiem augšpusē) — novietojiet Uniwando uz vaigu kaula. Lēnām virziet to uz auss augšdaļu.
- Atkārtojiet sejas pretējai pusei.

Piere

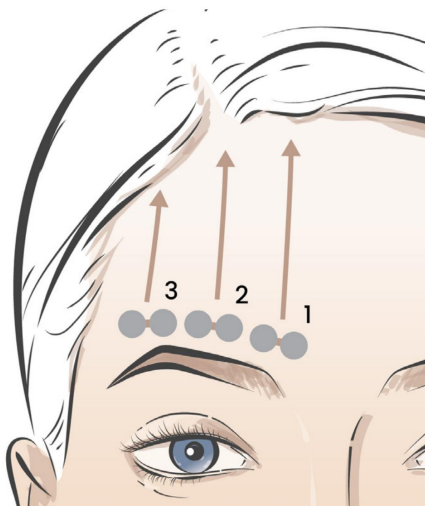


- Novietojiet Uniwand 1. pozīcijā, virs uzacs.
Lēnām virziet Uniwand matu līnijas virzienā.
- Atkārtojiet 2. un 3. pozīcijā.
- Atkārtojiet to sejas pretējai pusei.

Acis

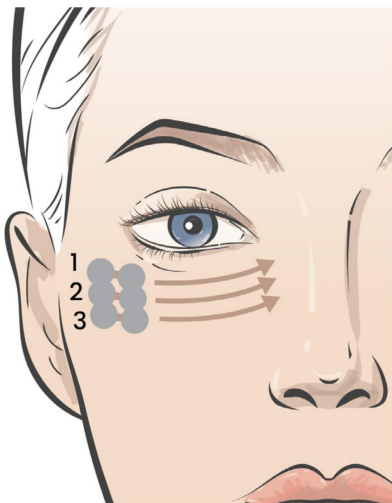


- Novietojiet Uniwand 1. pozīcijā, lodīlēm atrodoties horizontāli. Lēnām virziet to acs iekšējā kaktiņa virzienā, saglabājot sākumstāvokli.
- Atkārtojiet 2. un 3. pozīcijā.
- Atkārtojiet sejas pretējai pusei.

Lūpas

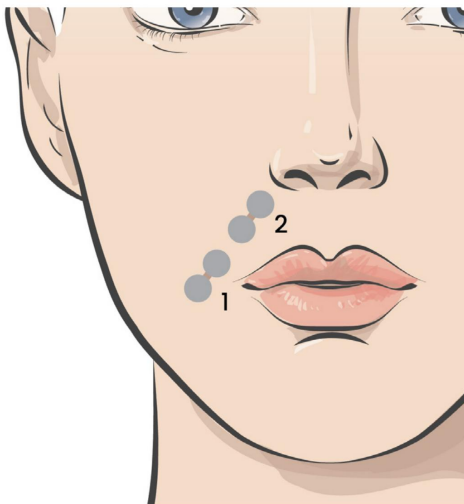

- Novietojiet Uniwand virs augšlūpas. Pabīdiet Uniwand uz augšu pret ausi un turiet to šajā pozīcijā 5 sekundes.
- Atkārtojiet 2. pozīcijā.
- Atkārtojiet to sejas pretējai pusei.

Vaigu kontūra

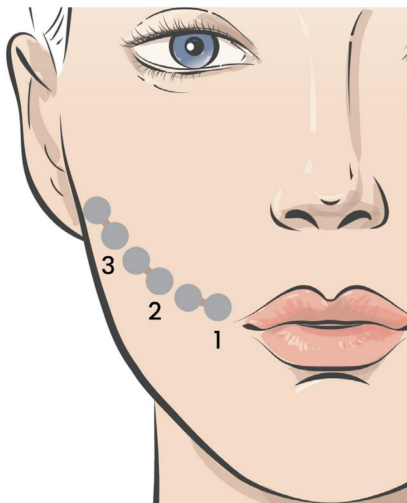

- Novietojiet Uniwand ieīci zem vaiga ābola deguna tuvumā. Paceliet vaigu kontūru, spiežot Uniwand uz augšu. Turiet Uniwand šajā pozīcijā
- Atkārtojiet 2. pozīcijā (zem vaiga ābola, pa vidu starp degunu un ausi) un 3. pozīcijā (zem vaiga ābola, pie matu līnijas)
- Atkārtojiet sejas pretējai pusei.

08. Uniwand lietošana

1. Notīriet sejas zonu, kuru vēlaties apstrādāt.
2. Pievienojiet Uniwand vadu Uniglo ierīces ligzdai.
3. Uzklājiet sejas zonai hialuronskābi saturošu gelu, līdzīgi kāsejas kremu.
4. Ieslēdziet Uniglo ierīci.
5. Ar programmas vadību pogu, izvēlieties programmu FACE 2.
Kad programma ir izvēlēta, sesija sāksies automātiski.
6. Veiciet sejas masāžu izvēlētajā zonākānorādīts iepriekš.



Katram vilcienam jāilgst 5 sekundes.

Katrā Uniglo programmas fāzē lietotājam jāpabeidz kustību ciklu komplekts.

Fāze 1: 2 cikli

Fāze 2: 3 cikli

Fāze 3: 2 cikli

Cikls = visi vilcieni visās pozīcijās abās sejas pusēs.

Fāze = noteikts ciklu skaits.

Piemēram, pieres apstrādēlietotājs veiku vilcienus

sejas kreisajāpusē1., 2. un 3. pozīcijā. Pēc tam viņš veiku vilcienus sejas labajāpusē, atkal 1., 2. un 3. pozīcijā. Tas būtu viens pilns cikls. 1. fāzēlietotājam šis process jāveic divas reizes (2 cikli), 2. fāzē– 3 reizes (3 cikli) un 3. fāzē– divas reizes (2 cikli).

Piezīme: Katrai fāzei ir iepriekš iestatīts laiks (skatiet

Uniglo rokasgrāmatu), lai veiku nepieciešamos ciklus.

Tomēr tiek sagaidīts, ka katras fāzes sejas ciklus pabeigsiet atvēlētajā laikā.

7. Ja esat pabeidzis katras fāzes ciklu skaitu pirms fāzes laika

beigām, atbloķējiet ierīci, nospiežot jebkuru no pogām ▼ un

3 sekundes turiet nospiestu fāzes izlaišanas pogu, lai pārietu

uz nākamo fāzi.



Piezīme: Paredzētais procedūras laiks katrai sejas zonai ir 5 minūtes.

8. Kad visas trīs fāzes ir pabeigtas, pāreijiet pie nākamās

sejas zonas, kuru vēlaties apstrādāt, un pabeidziet 1.,

2. un 3. fāzi, kā norādīts iepriekš.

Brīdinājums: nepietiekams gēla daudzums var radīt diskomfortu vai sāpes.

Lietošanas biežums

Mēs iesakām vienu sesiju dienā, 5 dienas nedēļā, 12 nedēļas.

Jūs varat pamanīt pozitīvu efektu jau pēc vienas sesijas, bet tas prasīs aptuveni 6 nedēļas, līdz manīsiet atšķirību .

Pēc sesijas

*Izslēdziet Uniglo un atvienojiet Uniwand;

*Nomazgājiet seju ar siltu ūdeni;

*Tīriet Uniwand ar bezalkoholisku salveti

vai mitru drānu un maigu ziepju šķīdumu, nosusiniet;

*Glabājiet Uniwand Uniglo somiņā.

09. Atkritumu utilizācija

Rūpīgi notīriet un utilizējiet saskaņā ar vietējiem noteikumiem.



10. Probl mu nov ršana

Ja jūsu Uniwand nedarbojas pareizi, lūdzu, pārbaudiet sekojošo:

Problēma

Sāpes sesijas laikā

Iemesls

Nepareiza programma (ne FACE 2)
Nepietiekami daudz gāša

Risinājums

Izmantojiet tikai mikrostrāvas
programmu (FACE 2).
Uzkāpiet pietiekami daudz gāša.

Kairinājums / alerģija

Nepieciešams cits gāšs

Pārtrauciet lietošanu,
izmēģiniet citu ūdens bāzes gāšu,
konsultējieties ar ārstu.

Nav sajūtu

Mikrostrāva bieži nav jūtama

Tāir norma.

11. Garantija

Uniwand ir viena gada garantija no iegādes datuma.

Šī garantija nav spēkā, ja produkts tiek modificēts vai pārveidots, ja tas tiek nepareizi lietots vai ļaunprātīgi izmantots; ja tas ir bojāts transportēšanas laikā; ja tas nav pienācīgi aprūpēts; ja tas tiek nomests; ja ierīce ir iegremdēta ūdenī; ja bojājumi rodas pievienotās rakstiskās instrukcijas neievērošanas dēļ; vai ja produkta remonts tiek veikts bez TensCare Ltd. atļaujas.



12. Tehniskā specifikācija

Ieīces specifikācijas

Izmēri: 134 × 25 × 25 mm

Svars: 53 g

Mikrostrāvas diapazons: 100 – 750 μA

Darba vide

Temperatūra: 0 – 40 °C

Mitrums: 10 – 93 % RH (bez kondensāta)

Spiediens: 700 – 1060 hPa

Uzglabāšana

Temperatūra: -25 – 70 °C

Mitrums: 10 – 93 % RH (bez kondensāta)

Spiediens: 700 – 1060 hPa

